

2025-2026



北京兰贝石恒温技术有限公司
BEIJING LABONCE THERMOSTATIC TECHNOLOGY CO., LTD.




北京兰贝石恒温技术有限公司成立于 2008 年，地处北京中关村生命科学园区，致力于温湿度技术的研发和服务，主营药品稳定性试验箱、步入式药品稳定性试验箱、药品强光稳定性试验箱、恒温恒湿箱、干燥箱、培养箱和低温冷藏箱等温湿度设备，引进德国先进技术，采用进口优质零部件，性能稳定可靠。

下属工厂江苏兰贝石仪器有限公司拥有自建标准厂房、标准恒温测试实验室及钣金加工设备，通过了 ISO9001:2015 质量体系认证和 CE 认证，为三千多家企业提供产品及服务，产品出口美国、欧盟等五十多个国家和地区。

公司背靠科研院所，发挥自身人才优势，不断将研究成果应用于新产品中，以变频制冷技术应用于药品稳定性试验箱为例，实现节电节水减排 50% 以上。

北京兰贝石携江苏兰贝石、广州兰贝石、成都兰贝石和江苏小苍河四家子公司，竭诚为您服务！



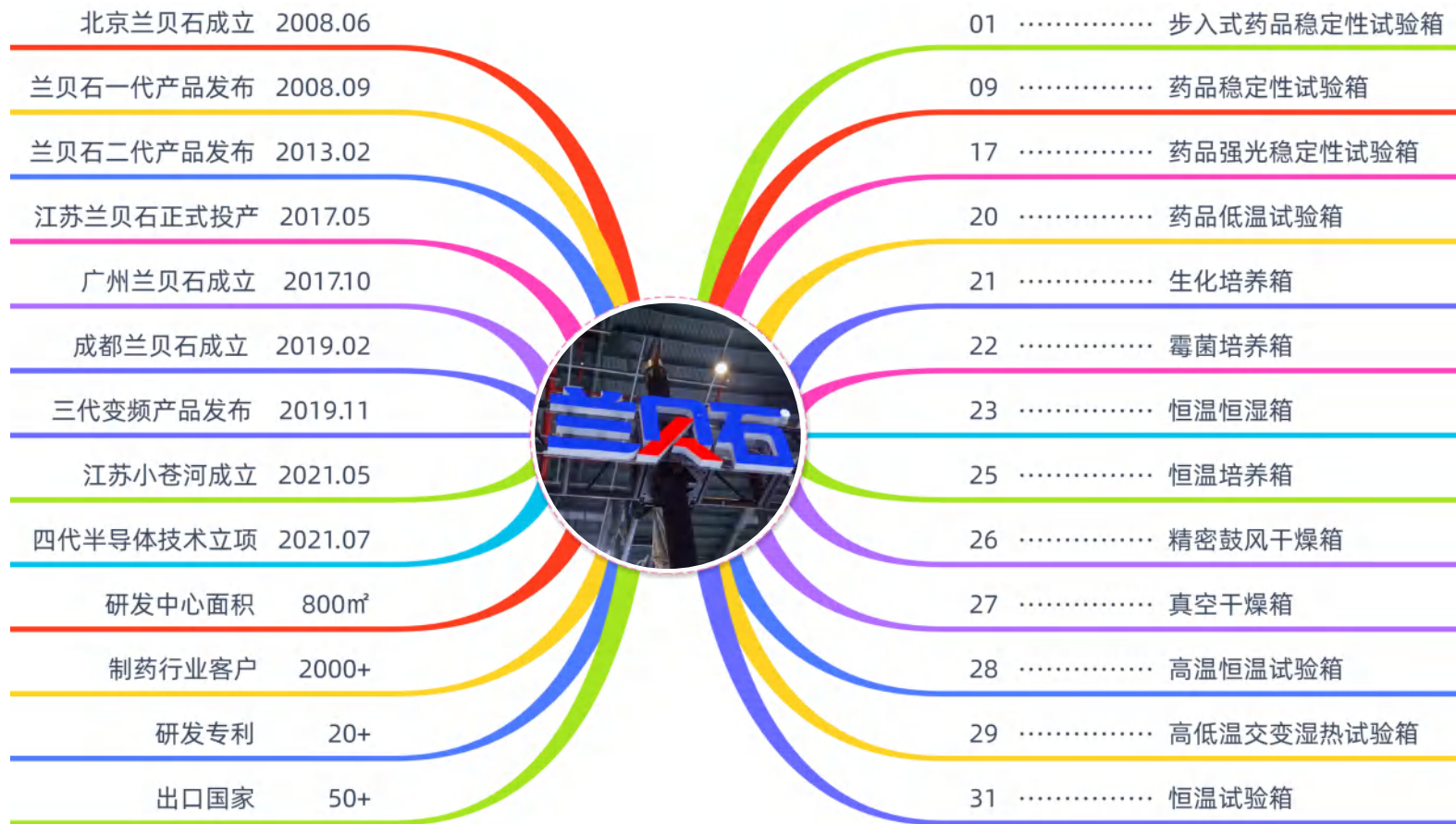

步入式药品稳定性试验箱 Walk-in Stability Chamber

基本信息

步入式药品稳定性试验箱	中文名
Walk-in Stability Chamber	英文名
尺寸定制	规格
ZL 202022621384.2	专利

技术规格

20~45℃	温度范围
±0.5℃	温度波动度
±1.0℃	温度偏差
20~80%RH	湿度范围
±2.0%RH	湿度波动度
±3.0%RH	湿度偏差

公共要求

380V/220V 50Hz/60Hz	电源
纯化水 电阻率≥0.5 MΩ.cm	水源
5~35℃	环境
符合ICHQ1和CP2025 以及国家标准	标准
通过网口连接	网络

技术服务

CCA DQ	3Q 验证	技术服务
IQ/OQ		
PQ		

硬件配置

压缩机	进口变频压缩机	节能 > 50%
蒸发器	镀膜工艺	防腐能力倍增
加湿器	PTC加热体	自动防护功能
控制器	程序触摸屏	7寸彩色
	三级权限	可分配更多级
	审计追踪	存储操作记录
	变频特性	显示变频输出量
	提示功能	定期维护提示
湿度传感器	高精度电容式	原装进口
水路系统	自动水循环	带水位刻度
报警系统	现场声光报警	远程信息报警
结构材质	内部为不锈钢304	聚氨酯发泡保温
底板材质	不锈钢304花纹板	防滑并增加承重
观察窗	双层钢化玻璃观察窗	门加热和门框加热
安全防护	五重防护	含独立超温保护

软件配置

数据存储	自带存储硬盘, USB导出	5年以上
数据打印	针式微型打印机	长期保存
数据软件	多台设备局域连接	软著登字第12559111号
数据网络版	服务器版本功能	符合FDA 21CFR Part 11

技术优势

性能	出色的均匀性, 使得设备多年使用后, 也能在满载状态下符合 ICH 稳定性测试的要求
可靠	除了有更好波动度和均匀度, 超15年的实际应用考验
智能	除了更稳定的控制, 还增加了更多的维护保养提醒
效益	应用先进的变频制冷技术, 能耗比上一代降低 > 50%
成本	标配电表, 便于用户实时掌握设备的运行成本
安全	五重防护, 包含关键性的漏电保护

步入式药品稳定性试验箱（规格型号）



◆ 20m³~80m³



◆ 出口型 8m³~15m³



◆ 内部货架

型号	控温范围 (℃)	控湿范围 (RH)	容积 (m³)	内部尺寸 (mm) W×D×H	外部尺寸 (mm) W×D×H	安装功率 (KW)	备注
Labonce-8000GS-FC	20 ~ 45	20 ~ 80%	8	1900×2200×2000	2050×3150×2250	5.0	可根据现场 合理布局 定制尺寸
Labonce-15000GS-FC	20 ~ 45	20 ~ 80%	15	1900×4000×2000	2050×4950×2250	5.5	
Labonce-20000GS-FC	20 ~ 45	20 ~ 80%	20	2200×4100×2200	2400×4300×2400	5.5	
Labonce-33000GS-FC	20 ~ 45	20 ~ 80%	33	2950×5200×2200	3150×5400×2400	6.5	
Labonce-40000GS-FC	20 ~ 45	20 ~ 80%	40	3600×5200×2200	3800×5400×2400	7.0	
Labonce-60000GS-FC	20 ~ 45	20 ~ 80%	60	4400×6400×2200	4600×6600×2400	8.0	
Labonce-80000GS-FC	20 ~ 45	20 ~ 80%	80	5800×6400×2200	6000×6600×2400	9.0	

本彩页上的所有指标是在环境温度 20~25℃下测得。




◆ 三级权限




◆ 审计追踪



◆ 报警记录

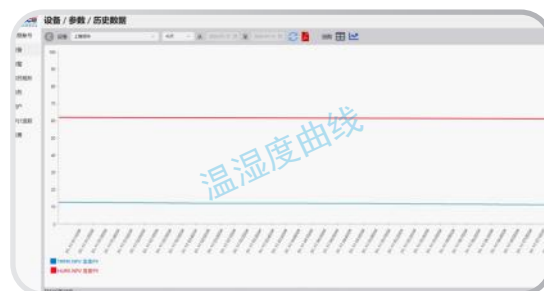


网络版
监控界面 (选配)

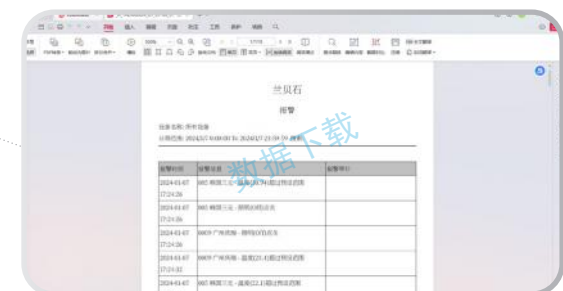





制冷输出比例为 63.9%
制冷节能 36.1%

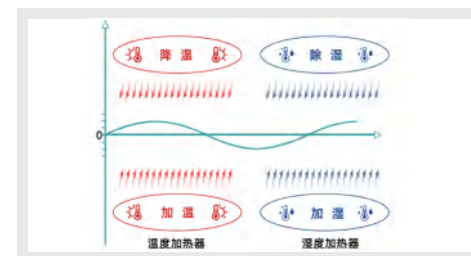


制冷输出比例为 30.0%
制冷节能 70.0%

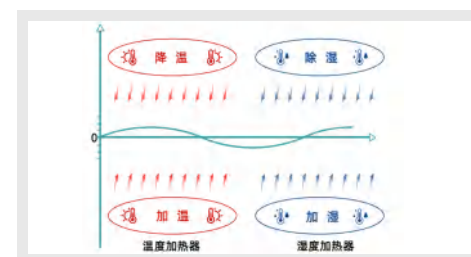


制冷输出比例为 5.0%
制冷节能 95.0%

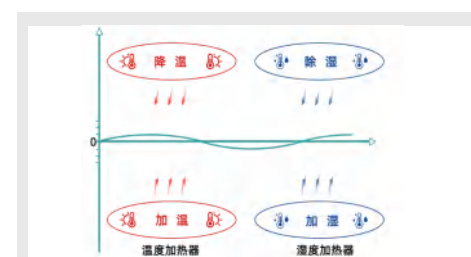


◆ 电表实测

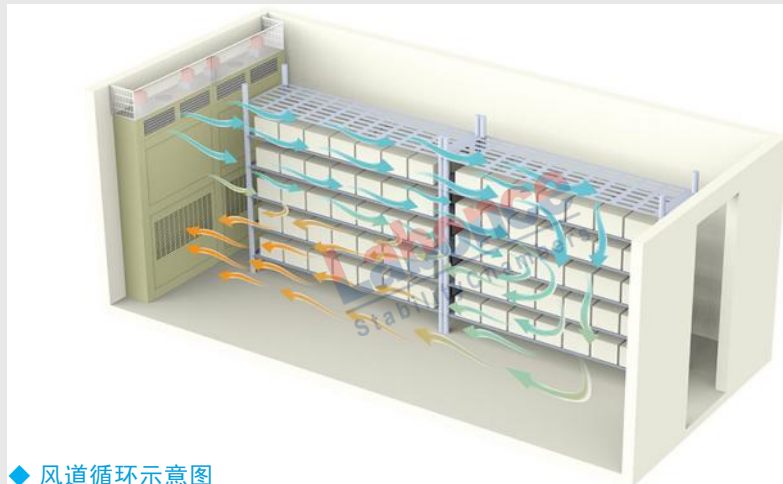

条件适宜的位置（一楼、二楼、顶楼、带阳台）
可安装室外压缩机，能大幅度降低室内二次空调降温费用


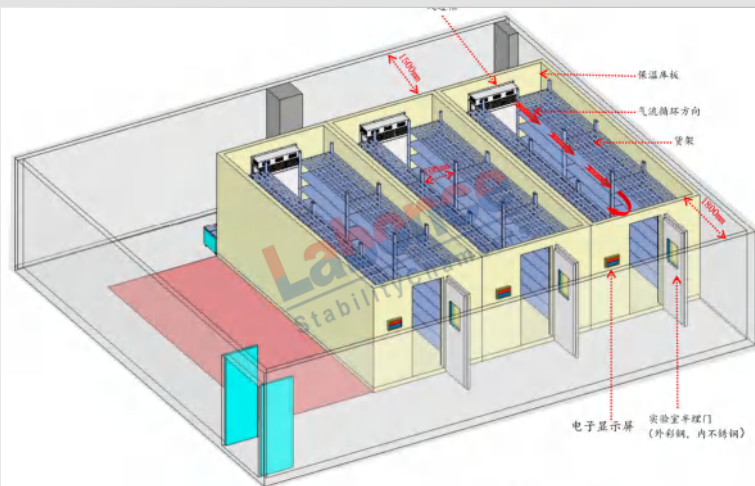



安装条件要求:
1. 环境温度: 5-35℃; 环境湿度: ≤85%RH
2. 设备的供电电源为: AC220V, 50HZ
3. 设备正面区域需配备空调或排风系统, 使环境温度达到使用条件要求

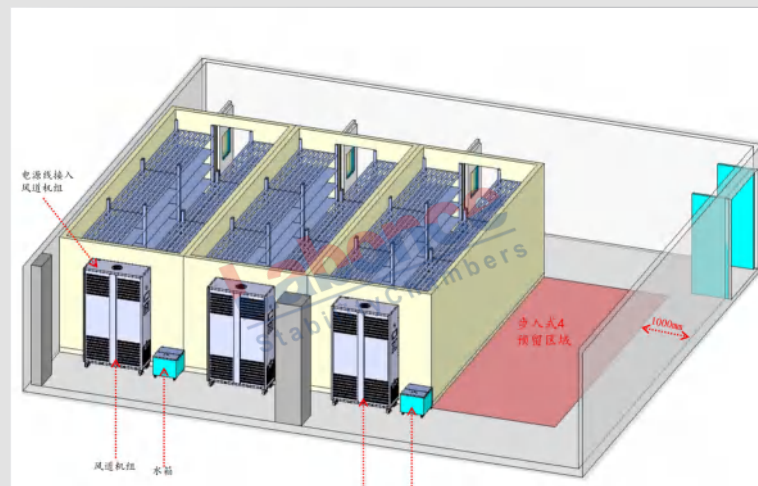



安装条件要求:
1. 环境温度: 5-35℃; 环境湿度: ≤85%RH
2. 设备的供电电源为: AC220V, 50HZ
3. 设备正面区域需配备空调或排风系统, 使环境温度达到使用条件要求




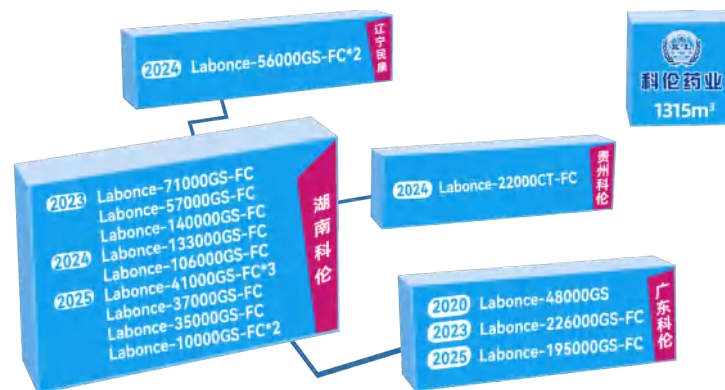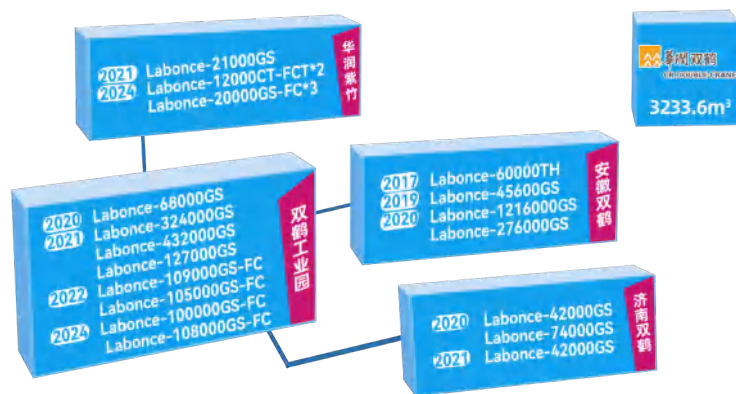

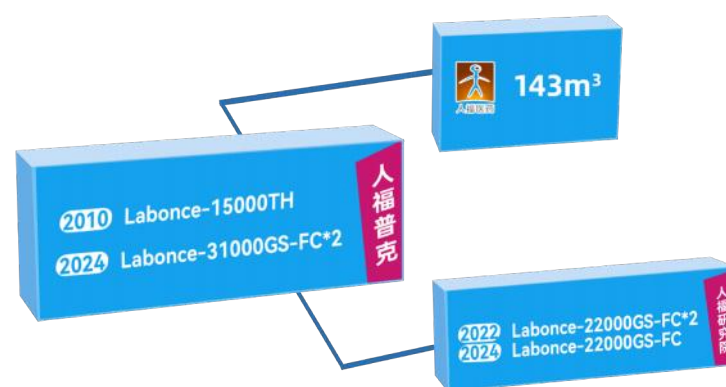

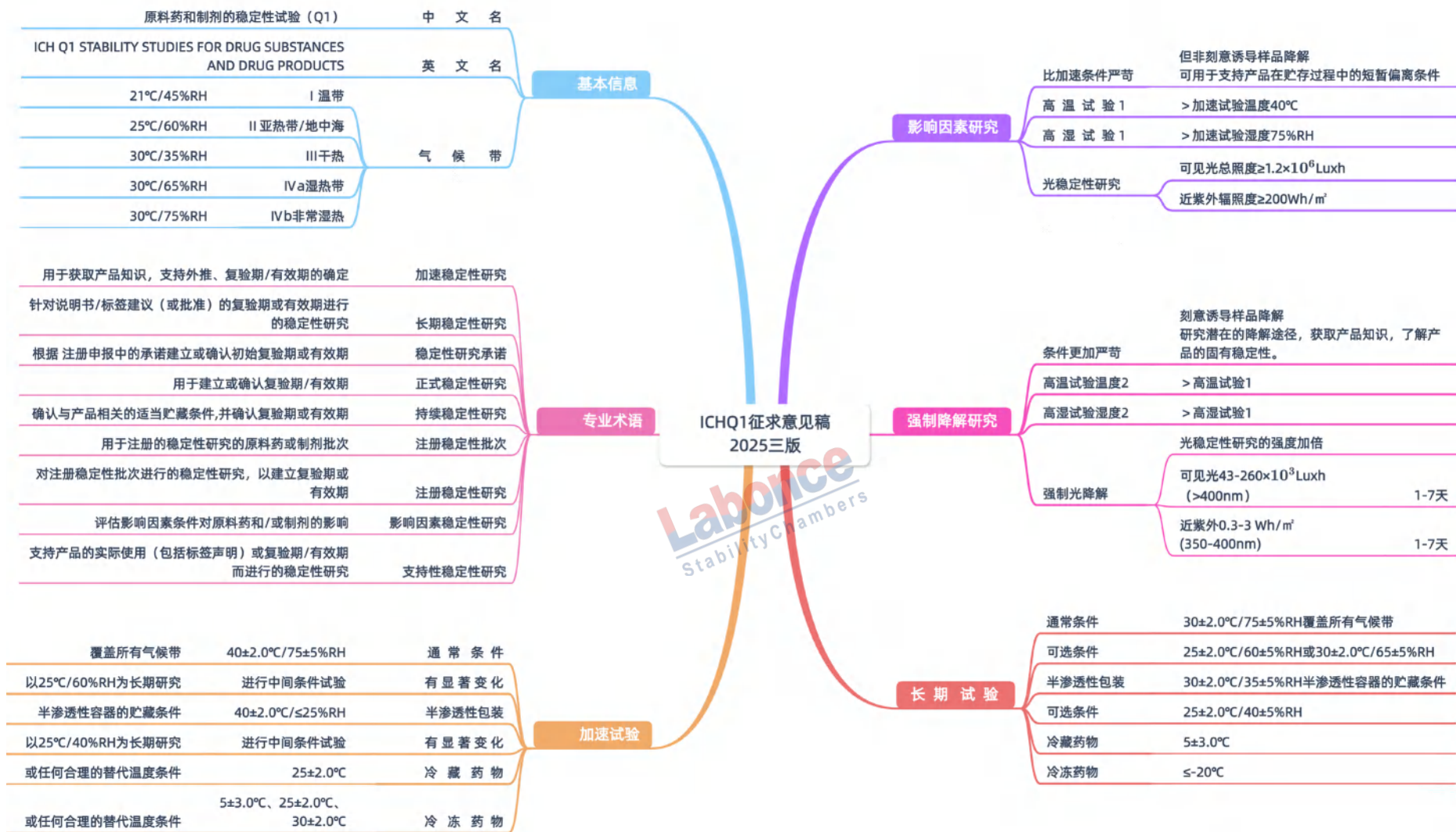

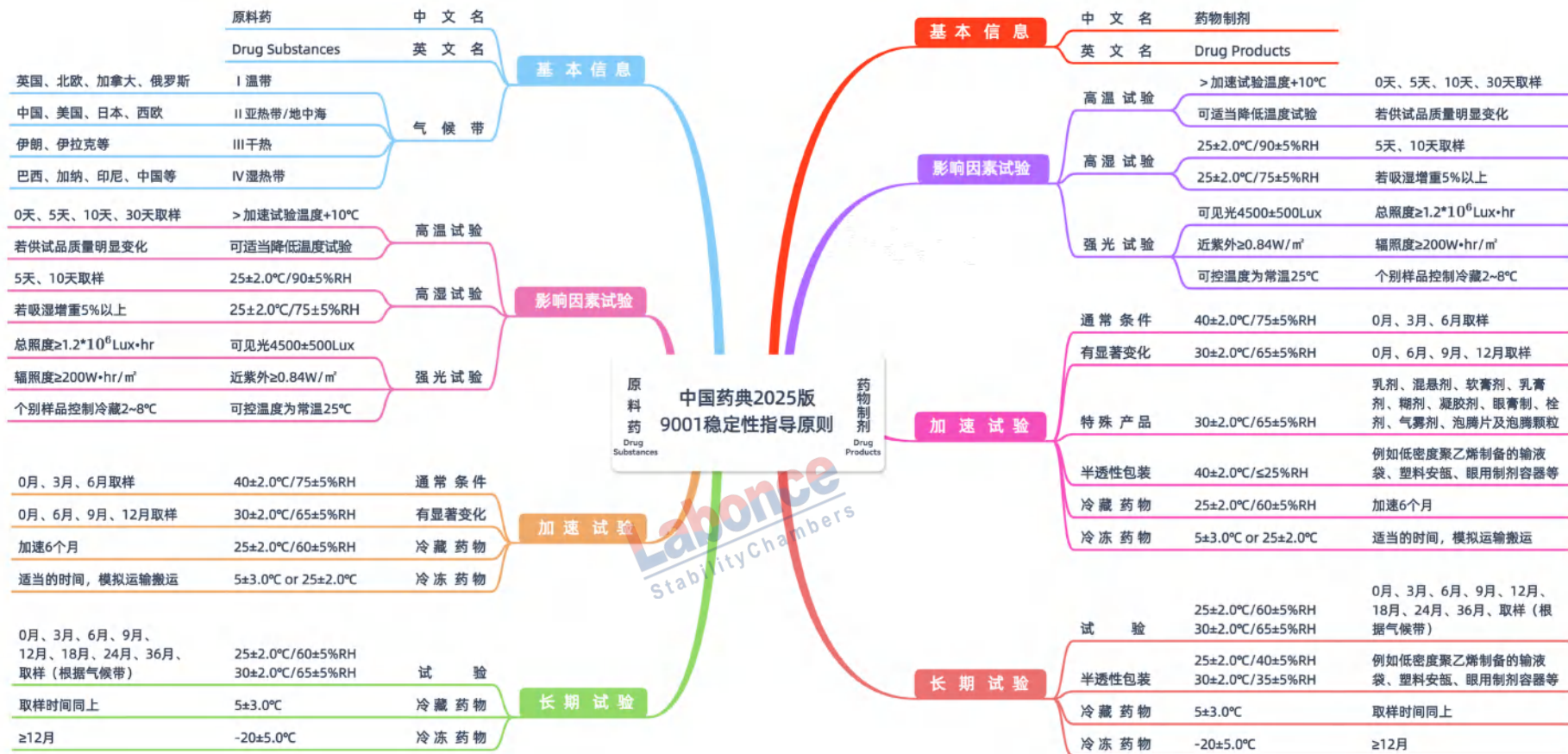

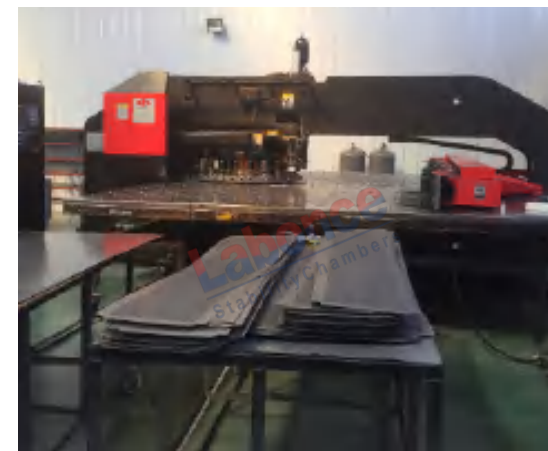

GlobalEquipX
Gateway to Overseas Markets

Products: What are you looking for?

Home | Product | Resources | Sign Up For Free | Start Selling

Stability Test Chamber
Labonco®



Anjunyan centrifuge
Safety with your meticulous research

RECOMMENDED INSTRUMENTS

- Stability Test Chamber
- Vertical low-speed centrifuge
- Glass-Lined Storage Tank
- Water-Cooled High Vacuum Molecular Vacuum Pump
- Stability Chamber (DCL)
- Desktop low-speed capacity centrifuge (large capacity)
- Vacuum Solvent Recovery System for Screen Pumps
- DMP Hydraulic Coupling Boots pump

ENTERPRISE EXPRESS

- Labonco® Stability Chambers
- Centrifuge
- Class-Lined Reactor
- Overseas Registration
- Enantiotech
- drugverse®
- AfaPa® www.afa.com
- AIFA 艾发泵
- Labonco® Stability Chambers
- LuMeley 露美利
- Mapalase
- Overseas Registration

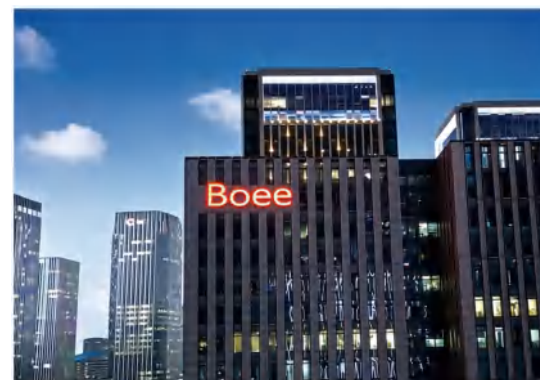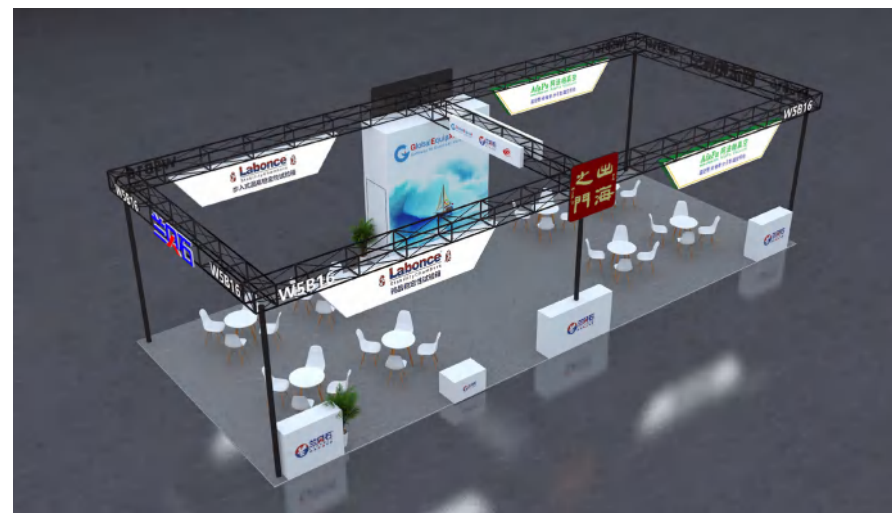

GlobalEquipX
www.globalequipx.com

杭州出海之门信息科技有限公司
Hangzhou GlobalEquipX Information Technology Co., Ltd.

Gateway to Overseas Markets

QR Code 1

QR Code 2



www.GlobalEquipX.com

☎ : 0086-19033929685

✉ : service@globalequipx.com

分支机构

北京兰贝石恒温技术有限公司
江苏小苍河生物医疗有限公司
江苏兰贝石仪器有限公司
广州兰贝石科技有限公司
成都兰贝石科技有限公司
兰贝石湖南办事处
兰贝石湖北办事处
兰贝石山东办事处
兰贝石杭州办事处

每分每秒把钱省 变频节能 控制更稳

药品稳定性试验箱就这么选！

全国统一服务热线：400-600-8767

样本上的所有数据和图片如有修改，恕不另行通知，以公司网站公布的内容为准

www.lanbeishi.com

重要的事情说三遍！！

谨防钓鱼诈骗网站，百度搜索“北京兰贝石恒温技术有限公司”，请认准“官网”标志



北京兰贝石恒温技术有限公司
BEIJING LABONCE THERMOSTATIC TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：北京市中关村生命科学园北清创意园2-3-101 邮编(P. C.): 102206
电话(TEL): 010-56545023 400-600-8767 Email: 13811269131@163.com
网址(WEB): www.lanbeishi.com www.labonce.com



兰贝石公众号：
LBS4006008767



兰贝石客服：
13811269131